

令和6年10月18日

下呂市長 様


住所 岐阜県下呂市萩原町羽根 437 番地
 法人名 特定非営利活動法人 すずらん
 代表者名 田 中 哲



介護機器等導入報告書

事業所名	グループホーム すずらんの木		介護サービスの種別	認知症対応型共同生活介護		
導入した介護機器等の名称及び概要	類型	名 称	種別等	台数	価格	その他経費等
	エ	ハイブリッド フロアー センサーM EMF-57 見張り番Ⅱ ミニ送信機 NC-5000TXBF2		2 2	49,060 30,580	
【事業概要】 先駆的事业・センサーマットを導入することで、職員の負担の軽減、および利用者の転倒を防ぐ。 総事業費 79,640 円						
【介護機器等導入により期待される効果と達成すべき目標】 ・利用者様が居室で過ごす際の転倒のリスクを軽減する。 ・職員が何度も様子を見に行くなどの精神的・身体的負担を軽減する。 ・利用者様が安全に過ごす事ができる。						
【導入によって得られた効果】（様式第1号に掲げた順に検討する。）						
導入前			導入後		評価	
1. 昼夜を問わず、転倒のリスクのある利用者様が居室で起き上がった時など動きが把握できない。職員が訪室する負担が大きい。			1. 利用者様の動きを把握することができ、職員の動きが効率的になったことで身体的・精神的な負担が軽減され、介護時間を短縮できた。		1. 良	
2. 夜間、何度も職員が訪室するため、利用者様の睡眠の妨げになることがある。			2. 職員の訪室回数が減り、利用者様の睡眠を妨げることが減り、ゆっくり休んでいただけている。		2. 良	
3. 利用者様が起きられた時にすぐにつけることができない。			3. 利用者様の動きを早めに把握することができ、すぐに訪室し対応することができた。転倒のリスクの軽減に繋がっている。		3. 良	

- ※添付書類 (1) 補助金精算額算出内訳書（様式第6号）
 (2) 対象経費の支出を証明する書類
 (3) 介護従事者の評価を確認できる書類
 (4) 介護機器等の導入効果を検証した会議の議事録（様式第5号）
 (5) 市長が特に必要と認める書類

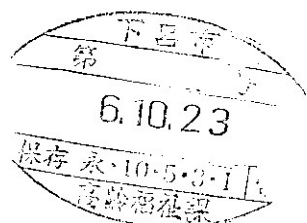

無線ナースコールシステム 見張り番 II

様々な施設環境でご利用できる無線機器ファミリー！


1 センサーの無線接続として！

既存のナースコール設備へ接続

2 ナースコール&センサーシステムとして！

据置型 または 携帯型 専用受信機へ

見張り番 II 設置例

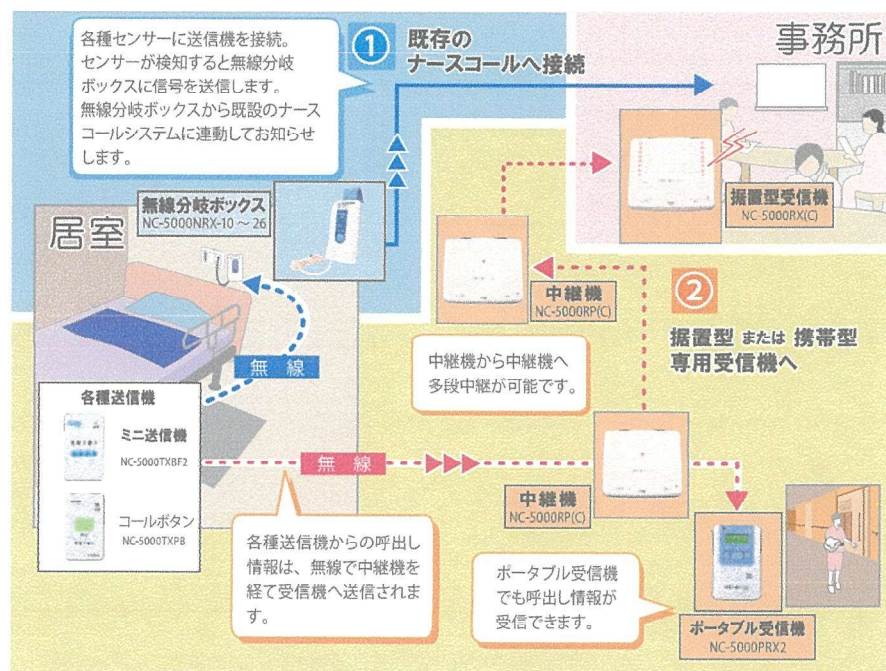

「見張り番 II」 ナースコールシステム構成

既存ナースコール接続用受信機 無線分岐ボックス NC-5000NRX-10 ~ 26

価格
タイプ A ¥39,600 (税込)
タイプ B ¥42,900 (税込)



- 見張り番IIの受信機機能と既存のナースコールに接続する分岐ボックスの機能を一体化しました。ケーブルが減り、取扱いやすくなります。
- ナースコールのある施設様でお使いいただけます。
- 送信機を3個まで登録できます。
- アラームを一時的に停止することができます。
- 送信機の電池が交換時期になると、送信機からの信号を受けた際に無線分岐ボックスの送信機 LED が点滅してお知らせします。(月に一回動作確認をして下さい。)
- 分岐ボックスのコネクタの種類は P.13 を参照ください。

据置型受信機 NC-5000RX(C)

価格 ¥62,700 (税込)



光とブザー音/メロディー (8種類) でお知らせします。
1台の受信機で最大16種類の呼び出しボタンやセンサーを登録できます。
複数の受信機をご利用いただけます。
送信機の電池が交換時期になると、送信機からの信号を受けた際に LED が点滅してお知らせします。(月に一回動作確認をして下さい。)

ポータブル型受信機 NC-5000PRX2

価格 ¥59,400 (税込)



ブザー音/パイプでお知らせします。
1台の受信機で最大63種類の呼び出しボタンやセンサーを登録できます。
複数の受信機をご利用いただけます。
送信機の電池が交換時期になると、送信機からの信号を受けた際に表示部でお知らせします。(月に一回動作確認をして下さい。)

中継機 NC-5000RP(C)

価格 ¥39,600 (税込)



無線到達距離が延長できます。
多段中継も可能です。
複数使用することによって建物全体をカバーできます。
テストボタンで無線到達距離の確認ができます。

ミニ送信機 NC-5000TXBF2

価格 ¥23,650 (税込)



フロア、ベッド兼用の送信機。
信号を発報するまでの時間を、0/1/2/4秒から選択できます。

コールボタン NC-5000TXPB

価格 ¥29,700 (税込)



携帯できる小型呼び出しボタン。

一時停止ボタン NC-5000TXPH

価格 ¥26,400 (税込)



無線分岐ボックス専用の一時停止ボタン。
一時停止、解除を離れた場所からボタンで操作することが可能で、余計な発報を防ぐことができます。
一時停止解除をしなくても3分間自動的に解除する為、一時停止の解除し忘れもありません。


ミニ中継機 NC-5000RP2

価格 ¥29,700 (税込)



無線到達距離が延長できます。
多段中継も可能です。
複数使用することによって建物全体をカバーできます。
本体をコンセントに差し込むだけで使用できます。

見張り番II対応センサー

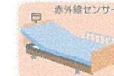

※それぞれのセンサーの詳細は、各商品のページをご参照下さい。



見張り番II専用受信機はシステム商品です。事前に通信調査をして、お見積もりを提示し、設置準備を致します。設置場所の条件により中継機が必要となりますので、必ず通信テストを実施してください。

徘徊防止に! フロアセンサー




マットを踏むと検知!

- ベッドから降りた時やドアから出ようとした時など、センサーマット上に体重がかかると検知します。
- 徘徊や転倒の危険のある利用者さんに最適です。

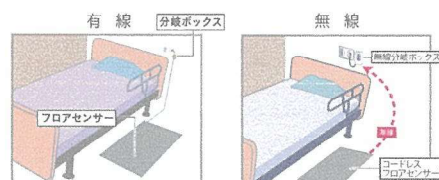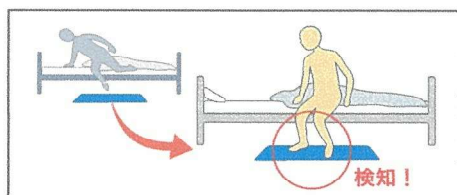

(写真は M サイズ)

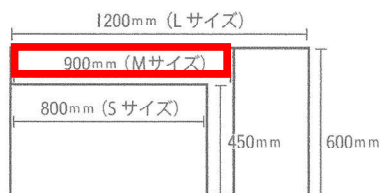


	フロアセンサー 単体	有線 ナースコール接続セット	無線 見張り番 II NC セット
		セット内容/ハイブリッドフロアマット、 分岐ボックス、ナースコール接続ケーブル	セット内容/ハイブリッドフロアマット、 ミニ送信機、無線分岐ボックス
ハイブリッドフロア センサーSサイズ	EFM-57/S-C 価格 ¥29,700 (税込)	EFMS-57/S 価格 ¥39,600 (税込)	SNC5000F-57/S 価格 ¥71,500 (税込)
ハイブリッドフロア センサーMサイズ	EFM-57/M-C 価格 ¥42,900 (税込)	EFMS-57/M 価格 ¥53,900 (税込)	SNC5000F-57/M 価格 ¥82,500 (税込)
ハイブリッドフロア センサーLサイズ	EFM-57/L-C 価格 ¥48,400 (税込)	EFMS-57/L 価格 ¥59,400 (税込)	SNC5000F-57/L 価格 ¥88,000 (税込)

ベッドからの転倒・転落防止に! ベッドセンサー



- 利用者の転倒転落を防ぐため、ベッドから降りる前に検知するセンサーです。
- ベッドから起き上がった時、ベッドの端に寄った時など、検知をご希望する方法によってお選び頂けます。

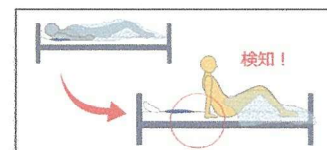


ベッドセンサー使用例

ベッドから起きると検知!

- ・利用者が寝た時にセンサーパッドが背中の下に来るように配置します。
- ・利用者がベッドから起きて、体重がセンサーパッドにかからなくなるとナースコールします。

ベッドセンサー(有線タイプ)

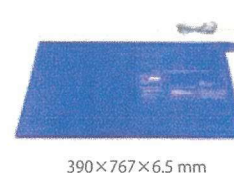

390×767×6.5 mm



- ・マイメロディーSを使って有線でナースコールに連動してお使い頂けます。

ワイドサイズ EPB54-W-1 価格 ¥14,300 (税込)


マイメロディーSセットワイドサイズ
EXC05S-5W 価格 ¥72,600 (税込)

セット内容・ワイドサイズ: 1枚 ・マイメロディーS: 1台
・NC 接続ケーブル ・分岐ボックス: 1個

コードレスベッドセンサー



390×850×1.5 mm

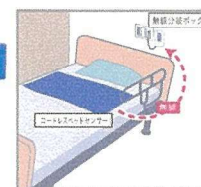

- ・無線分岐ボックスを使って無線でナースコールに接続してお使い頂けます。

EPB58-W-2 価格 ¥24,200 (税込)

見張り番 II NC セット コードレスベッドセンサー
SNC5000B-58W 価格 ¥77,000 (税込)

セット内容・ベッドセンサーパッド & 内蔵送信機: 1枚
・無線分岐ボックス